

\*\*2010 年 9 月 1 日改訂(第 5 版)  
\*2010 年 6 月 4 日改訂(第 4 版)

医療機器承認番号 22100BZX00144000

機械器具(06) 呼吸補助器  
JMDN コード：70566000 呼吸回路セット  
管理医療機器

## NPB 呼吸回路セット (メディケーションカップ)

### 再使用禁止

#### 【警告】

1. 本品は、単一患者使用であり、滅菌済みで出荷されている。梱包シールを調べ、梱包シールに損傷がある場合は、使用しないこと。
2. 噴霧中は加温加湿器の電源を切る。又メディケーションカップに薬液が入っていない状態で噴霧を行わないこと[適切な噴霧と薬液微粒子サイズを得るため]。
3. 本品に欠陥のある場合、ネブライザの出力に影響を与える。使用ごとに、本品に損傷のないことを確認すること。
4. 使用前に必ず、本品に損傷の無いことを確認すること[ネブライザの出力レートに影響を及ぼすため]。

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。使用後は廃棄すること。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 形状

本品には薬液の最大注入レベルを示す線が刻まれている。本品の最大容量は 10mL である。

##### 2. 原理

ネブライザは、超音波を発振する圧電素子(ピエゾ)を内蔵していて、この素子の振動はバッファ水を通じて本品に伝わり、薬液を微粒子に転化する。

#### 【使用目的、効能又は効果】


本品はネブライザと組み合わせて使用し、ネブライザが噴霧する薬液を本品に注入しておく。その薬液はバッファ水を通じて伝わった振動により微粒子に転化され噴霧に使用される。

#### 【操作方法又は使用方法等】

注意：詳しい操作方法については、ネブライザの取扱説明書を参照すること。

<取付方法>

1. バッファ水を最大注入ラインと最小注入ラインの間になるように注入する。
2. 本品を包装から取り出し、カップ先端がバッファ水に浸るようにバッファバイアル内に入れる。

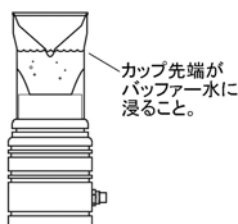

3. 本品に 10mL までの薬液を入れる。
4. ネブライザの取扱説明書にしたがって、ネブライザを組み立てる。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の梱包シールに損傷が認められた場合は、使用しないこと。
- (2) 噴霧中に本品やバッファ水に触れないこと。

#### 【貯蔵方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光、水ぬれを避けて保管すること。

#### 【包装】

1 箱 10 個入り

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：

**コヴィディエン ジャパン株式会社**

〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2

お問い合わせ先：

レスピラトリー事業部

札幌営業所 TEL (011)241-5418

仙台営業所 TEL (022)211-6422

東京営業所 TEL (03)5717-1440

名古屋営業所 TEL (052)709-6691

金沢営業所 TEL (076)232-4450

大阪営業所 TEL (06)6455-8900

広島営業所 TEL (082) 536-0170

高松営業所 TEL (087)868-2201

福岡営業所 TEL (092)271-0276

\*\*外国製造業者名：

Covidien

(コヴィディエン)

アイルランド

Covidien

(コヴィディエン)

メキシコ合衆国 (Ciudad Juárez)

Covidien

(コヴィディエン)

メキシコ合衆国 (Baja California)